


## DISECTOR DE CONJUNTIVA BLUMENTHAL PUNTA DISCO

REFERENCIA: K3-1124

MARCA: KATENA

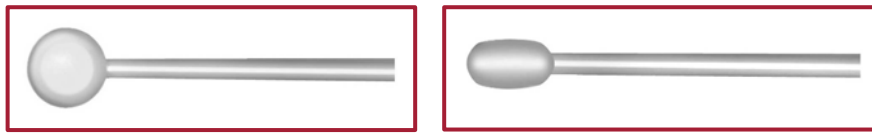

Disector de conjuntiva de tipo de Blumenthal (arriba), detalle de la punta en vista superior (abajo, izquierda) y vista de perfil (abajo, derecha).

### Descripción:

El disector de conjuntiva de tipo Blumenthal cuenta con una punta biconvexa redondeada (en forma de disco) muy suave. Puede usarse para deslizarse delicadamente entre la cápsula de Tenon y la epiesclera para disecar ampollas.

Gracias a su eje largo puede llevar a cabo disecciones distales respecto a la incisión y puede ser usado tanto para procesos con base en el fórnix como limbal.

### Medidas:

Punta de 2 mm de ancho. Eje de 28 mm de longitud.

Longitud total de 129 mm.

### Materiales:

Acero inoxidable de grado médico.

### Presentación:

Caja de 1 unidad.

Reutilizable y esterilizable.

Fecha de edición: 20 de enero de 2023, Rev. 1.