

## PINZA SUTURA SNIDER

REFERENCIA: K5-2550

MARCA: KATENA

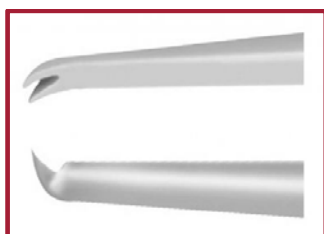


Imagen de la pinza de sutura Snider (arriba) y detalle de su punta (abajo)

### Descripción:

Pinza de sutura tipo Snider rectas, con dientes en configuración 1x2 ligeramente curvos, con plataforma para suturas y perno guía. Utilizada comúnmente en cirugías de cataratas y de trasplante de córnea.

### Medidas:

Dientes de 0,12 mm. Plataformas de sutura de 0,5 cm. Punta de 1,8 cm.

Longitud total de 10,7 cm.

### Materiales:

Acero inoxidable de grado médico.

### Presentación:

Caja de 1 unidad. Esterilizable y reutilizable.

Fecha de edición: 28 de octubre de 2021, Rev.1.