

CÁNULA POLYTIP 23G / 38G

REFERENCIA: MO-3254

MARCA: MEDONE

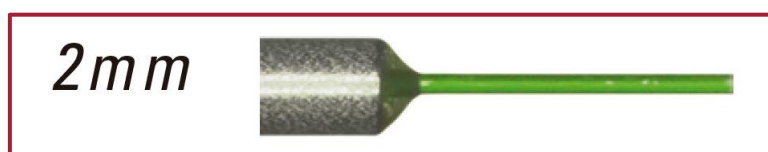


Imagen de la cánula PolyTip (arriba) y detalle ampliado de su punta (abajo).

Descripción:

Cánula subretinal PolyTip. Cuenta con una punta de paredes muy finas, con el objetivo de conseguir un final de la cánula semiflexible, fino y por el que pasa el mayor flujo posible. Su rigidez es suficiente con para penetrar la retina, sin que sea necesario hacer una retinotomía con otro material.

Estas características la hacen apta para el drenaje de pequeñas cantidades de fluido, como podría ser perfluorocarbono subretinal.

El color verde de la punta mejora su visibilidad, y dispone de rigidez suficiente para pasar con facilidad a través de trócares valvulados.

Medidas:

Diámetro externo de la punta de 38G, diámetro interno de 41G.

Longitud de la punta de 2 mm.

Longitud del eje de la cánula de 28 mm y grosor de 23G.

Presentación:

Caja de 5 unidades estériles envasadas individualmente. Desechables y de un solo uso.

Fecha de edición: 23 de septiembre de 2020, Rev. 1.