

CÁNULA POLYTIP 25/38g (2mm)

REFERENCIA: MO-3255

MARCA: MEDONE

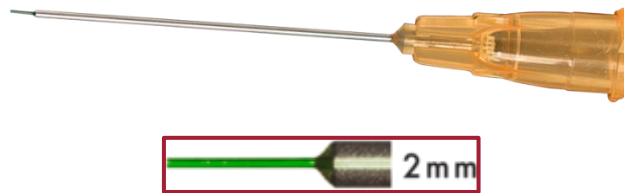


Imagen de la cánula PolyTip 25/38g (2mm) (arriba) y detalle de su punta (abajo).

Descripción:

Cánula subretinal PolyTip. Cuenta con una punta de paredes muy finas, con el objetivo de conseguir un final de la cánula semiflexible, fino y por el que pase el mayor flujo posible. Su rigidez es suficiente para penetrar la retina, sin que sea necesario hacer una retinotomía con otro material. Estas características la hacen apta para el drenaje de pequeñas cantidades de fluido, como podría ser perfluorocarbono subretinal.

El color verde de la punta mejora su visibilidad, y dispone de rigidez suficiente para pasar con facilidad a través de trócares valvulados. La conexión *luer lock* permite una conexión rápida a la jeringa, tubo de extensión o línea de infusión.

Medidas:

Punta de diámetro externo de 38G, diámetro interno de 41G y longitud de 2 mm.

Longitud del eje de la cánula de 28 mm y diámetro de 25G.

Presentación:

Caja de 5 unidades estériles envasadas individualmente. Desechables y de un solo uso.

Fecha de edición: 1 de marzo del 2021, rev 2.