

# Pinzas bipolares Wet-Field®

Material reutilizable

## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Clase II FDA, Clase IIb MDD De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> N/D
<b>Fabricante:</b> Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Las pinzas bipolares reutilizables son unos dispositivos electroquirúrgicos dirigidos a coagular tejidos o detener hemorragias en intervenciones oftálmicas esclerales e intraesclerales. Están diseñadas para utilizarse con el coagulador y los cables Wet-Field®*.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b> Certificado CE ISO 13485:2003	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Punta:</b> acero inoxidable</li><li><b>Mango recubierto de plástico:</b> poliamida</li><li><b>Clavijas conectoras:</b> acero inoxidable 302</li><li><b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> N/D	<b>Material de embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Principal:</b> protector de punta y bolsa de polietileno</li><li><b>Secundario:</b> envase de papel con paquete tipo almohada</li></ul>

\*Consulte la ficha técnica para 0590313, 0590319 y 0590320

Distribuido por:

**MEDICALMIX**

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

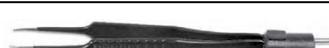
 **Beaver Visitec**  
Keeping Your Vision in Sight

## Características generales:

- Las pinzas bipolares están diseñadas para coagular con suavidad sin arco eléctrico entre las puntas pulidas del instrumental para reducir la adherencia del coágulo.
- Las hojas aisladas de las pinzas están diseñadas para reducir la posibilidad de descarga eléctrica durante la intervención.
- La posición de la punta es fiable y la tensión homogénea durante la operación ofrece un gran rendimiento en cada uso.
- Existen seis modelos disponibles, lo que ofrece versatilidad en la aplicación.

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

## Información del producto:

Pinza bipolar Wet-Field® - reutilizable		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
X-22-1204	 Pinza estándar Beaver Visitec Wet-Field®	1
X-22-1206	 Pinza recta para iris Beaver Visitec Wet-Field®	1
X-22-1207	 Pinza curva para iris Beaver Visitec Wet-Field®	1
X-22-1208	 Pinza de Adson Beaver Visitec Wet-Field®	1
X-22-1209	 Pinza de coaptación Beaver Visitec Wet-Field®	1
X-22-1211	 Pinza de Tenzel Beaver Visitec Wet-Field®	1

\*Consulte la ficha técnica para 0590313, 0590319 y 0590320

### Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452,  
oficina de EE. UU.:  
866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
www.beaver-visitec.com

### Todos los demás clientes:

85c Park Drive  
Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA