



**Bipolar hemostático  
Wet-Field®  
Eraser® (23GA)**

**Material estéril un solo uso**

Distribuido por:



**Clase del producto**

Clase IIb, estéril, un solo uso  
De acuerdo con la Directiva del Consejo  
93/42/EEC relativa a los productos sanitarios

**Fabricante**

Beaver-Visitec International Inc.  
Waltham, MA, USA

**Información de Certificados**

• **Certificado CE**

CE 0120  
SGS Certificado US10/81383

• **ISO Certificados**

ISO 9001:2008 - Certificado US10/81384  
ISO 13485:2003 - Certificado US10/81385

**Producto estéril**

- Óxido de Etileno
- Sterigenics

**Caducidad**

- 3 a partir de la fecha de fabricación

**Indicaciones**

Diseñado para hemostasis o coagulación.

**Composición del producto**

- **Punta:** Acero inoxidable
- **Mango:** Resina ABS
- **Ausencia de:** Látex / PVC / Ftalatos/  
Componentes de origen animal

**Material del envase**

- **Envase unitario:** PVC /Tyvek
- **Caja:** Cartón


## Características generales

- A medida que la energía pasa a través del tejido circundante, hace vibrar las moléculas de agua a alta velocidad y el calor se acumula rápidamente.
- Este calor genera la coagulación de la sangre y la hemostasis.
- El tejido vascular se concentra más con las moléculas de agua.
- La diatermia genera calor más rápidamente que el tejido circundante.
- El tejido circundante se mantiene sano

**Cuidados & Precauciones:** Leer la etiqueta de la caja y la información para el usuario.

## Información para pedidos:

Wet-Field® Eraser® (23GA)		
Ref #	Descripción	Cantidad por caja
X-22-1268	<b>Bipolar hemostático Wet-Field Eraser 23 G punta fina, recto</b>	<b>5</b>
X-22-1268-135	<b>Bipolar hemostático Wet-Field Eraser 23 G punta fina, angulado 135 grados</b>	<b>5</b>
X-22-1268-150	<b>Bipolar hemostático Wet-Field Eraser 23 G punta fina, angulado 150 grados</b>	<b>5</b>
X-22-1269	<b>Bipolar hemostático Wet-Field Eraser 23 G punta roma, recto</b>	<b>5</b>
X-22-1269-90	<b>Bipolar hemostático Wet-Field Eraser 23 G punta roma, angulado 90 grados</b>	<b>5</b>
X-22-1269-135	<b>Bipolar hemostático Wet-Field Eraser 23 G punta roma, angulado 135 grados</b>	<b>5</b>
X-22-1269-150	<b>Bipolar hemostático Wet-Field Eraser 23 G punta roma, angulado 150 grados</b>	<b>5</b>

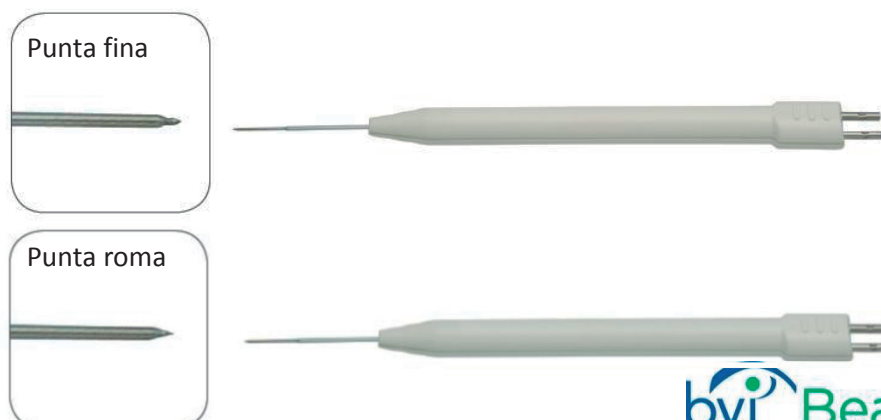

Distribuido por:

**MEDICALMIX**

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Amposta, 20 | 08174 Sant Cugat del Vallès  
T. 935 893 637 | F. 935 892 829  
mmix@medicalmix.com | www.medicalmix.com

**bvi** Beaver Visitec  
*Keeping Your Vision in Sight*

Paseo de la Castellana, 95  
Planta 18, Madrid, España  
Tel.: 0034 91 123 03 35  
Fax: 0034 91 181 74 94  
www.beaver.visitec.com