

# Lentes Vitrectomía desechables Vitreq

De un solo uso, estéril



## FICHA TÉCNICA

<b>Clase del producto:</b> Clase Is estéril, de un solo uso.	<b>Caducidad:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 años desde la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Vitreq Holanda	<b>Descripción:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lentes de vitrectomía diseñadas para ser colocadas sobre la córnea del paciente, pensadas para mejorar la visualización del fundus y las estructuras retinales por el personal quirúrgico. Se usan conjunto un microscopio oftálmico durante la cirugía vitreoretinal.</li></ul>
<b>Certificados de Calidad:</b> Certificado CE ISO 13485	<b>Material de fabricación:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Lentes</b> : PMMA</li><li>• <b>Anillo de la lente</b> : Elastómero Termoplástico</li><li>• <b>Ausencia de:</b> Látex / Pftalatos/ Componentes de origen animal.</li></ul>
<b>Método de esterilización:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mediante Óxido de Etileno.</li></ul>	<b>Material del embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Primario:</b> Bandeja de PTEG&amp; Embolsado de papel</li><li>• <b>Secundario:</b> Caja de cartón</li></ul>

## Características Generales:

- Varios modelos de lentes para vitrectomía, desechables
- **Accesorio: No se incluye Solución Viscoelástica con la lente.**
- Anillo flexible de silicona, moldeado con cuatro hápticos que rodean la lente para una mayor estabilidad.
- No es necesario suturar el anillo de fijación o ayuda auxiliar para estabilizar la lente encima de la córnea.
- Para uso oftálmico, en un espacio estéril preparado para realizar cirugías oftalmológicas

**Precauciones & Advertencias:** Mirar en la etiqueta de la caja.

---

## Descripción e información del producto:

### Lentes p/Vitrectomia desechables VitreQ

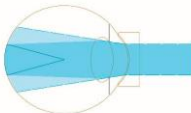
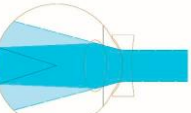
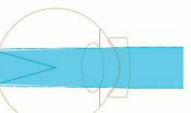
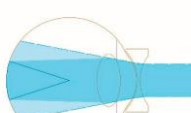

Referencia	Descripción	Unidades por caja
BVI-VL00.D01	Lente Vitrectomía Plana	5
BVI-VL00.D02	Lente Vitrectomía Bicóncava	5
BVI-VL00.D03	Lente Vitrectomía Aumento	5
BVI-VL00.D04	Lente Vitrectomía Visión de campo amplio	5
BVI-VL00.D05	Lente Vitrectomía Prisma de 30°	5
<b>Accesorios Lentes p/ vitrectomía desechables VitreQ (recomendado)</b>		
BVI-585306	BVI HPMC HIDROXIPROPILMETILCELULOSA 2% 2ml EN JERINGA + CANULA 25G v	1

Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA



## Características Técnicas:

Lente	Aumento	Campo de visión (focalizado)	Campo de visión (total)	
<b>BVI-VL00.D01</b> Lente Plana	1.0x	32°	74°	<p>Flat lens</p> 
<b>BVI-VL00.D02</b> Lente bicóncava	0.8x	35°	92°	<p>Biconcave lens (air filled eye)</p> 
<b>BVI-VL00.D03</b> Lente de aumento	1.4x	31°	37°	<p>Magnifying lens</p> 
<b>BVI-VL00.D04</b> Lente visión campo amplio	0.5x	33°	77°	<p>Wide Field lens</p> 
<b>BVI-VL00.D05</b> Prisma 30°	1.0x	32°	48°	<p>30 deg Prisma</p> 

Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA