


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

TREPANO LASEK CAMELLIN Y CONTENEDOR DE ALCOHOL

REFERENCIA: K2-7830 TREPANO 8 mm Y CONTENEDOR 8,5 mm
K2-7832 TREPANO 9 mm Y CONTENEDOR 9,5 mm

MARCA: KATENA

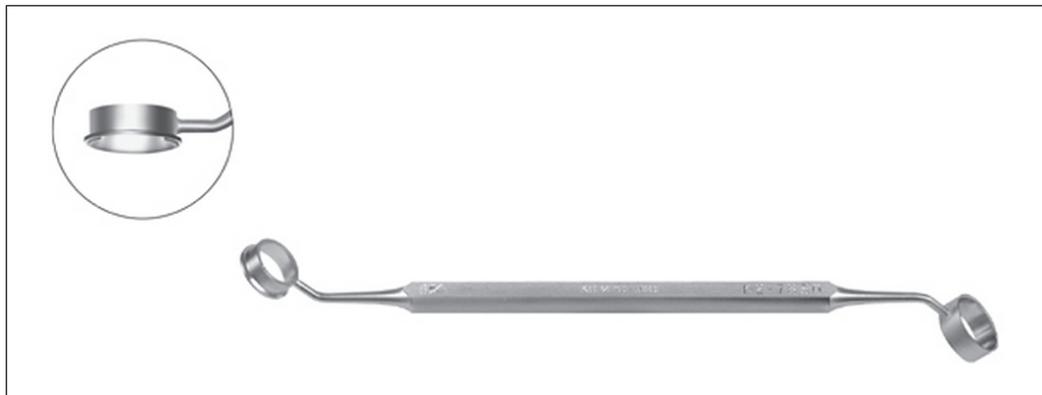

Descripción: Trépano Lasek Camellin con contenedor de alcohol. El diámetro del contenedor es ligeramente mayor que el del trépano, para que al superponerlo sobre la zona de trepanación, el alcohol penetre eficazmente sobre el epitelio precortado. Su diseño con ranuras duales de fijación previene fugas de alcohol y estabiliza el ojo durante la cirugía.

Medidas:

- K2-7830: Trépano de 8,0 mm de diámetro. Contenedor de alcohol de 8,5 mm de diámetro y altura 4 mm.
- K2-7832: Trépano de 9,0 mm de diámetro. Contenedor de alcohol de 9,5 mm de diámetro y altura 4 mm.

Longitud total del instrumento 12,5 cm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de mayo del 2015, rev.2