


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

TIJERA STOLTE PARA LIO BLANDA (CON CAJA DE ESTERILIZACION)

REFERENCIA: K5-5565

MARCA: KATENA

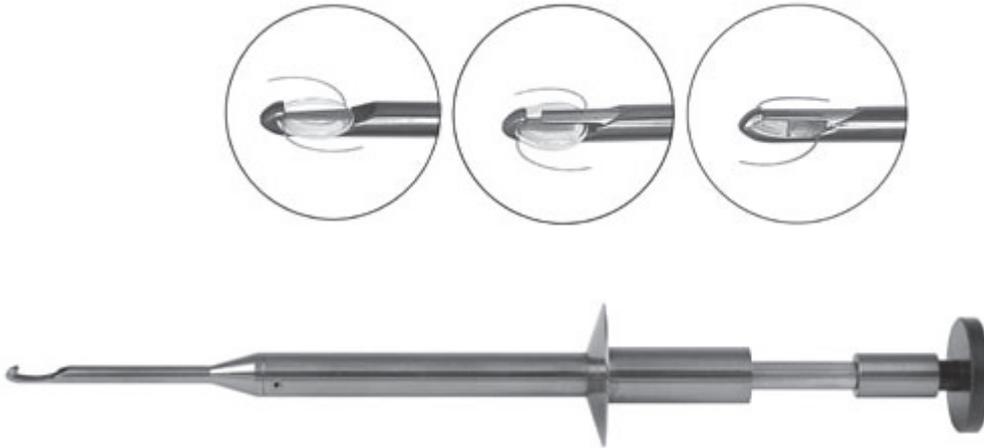

Descripción: Instrumento diseñado para ayudar a los cirujanos a cortar y explantar de forma segura las lentes intraoculares blandas, de silicona o acrílicas. Presenta una cavidad cóncava que se emplea para coger y sujetar la lente. A medida que se hace avanzar el émbolo, un plato fino y ranurado se desliza hacia adelante, por encima de la lente, para evitar que ésta se mueva mientras la cuchilla de corte se acopla y la disecciona. La parte delantera está diseñada para poder entrar en incisiones de 3,0 mm.

Incluye una caja de esterilización.

Medidas: Longitud total 13,5 cm.

Material: Fabricado en titanio. Reutilizable.

Presentación: Caja de 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 21 de mayo del 2015, rev.2