


PINZA UTRATA CAPSULORREXIS CORTA HDL

REFERENCIA: K5-5071

MARCA: KATENA

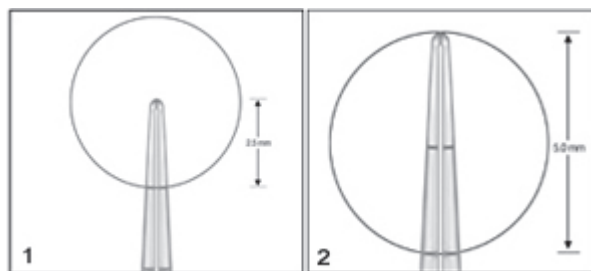

Descripción: Pinza para capsulorrexis con marcas en las superficies anteriores y que puede ser utilizada en capsulotomías de 5,0 mm. La primera marca es de 2,5 mm desde la punta y puede ser utilizada para medir el radio (figura 1), mientras que la segunda marca está ubicada a 5,0 mm de la punta (figura 2) y puede ser utilizada para medir el diámetro total de la rexis. La punta de la pinza es triangular y muy delicada y se puede usar para crear la rotura capsular inicial y agarrar el tejido durante el procedimiento.

Fabricada en acero inoxidable de grado médico.

Medidas: Largo total 8,3 cm. Mandíbulas rectas.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 18 de junio de 2015, rev. 2