


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PINZA MASKET CAPSULOREXIS CORTA HDL

REFERENCIA: K5-5074

MARCA: KATENA

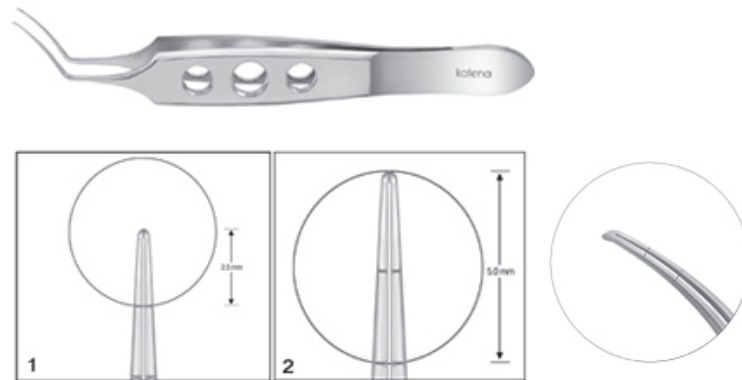

Descripción: Pinzas de Capsulorrexis curvadas, con puntos de referencia a 2,5 mm y 5,0 mm que permiten medir la capsulotomía a 0,5mm. La primera marca de referencia está a 2,5mm de la punta y su función es para medir el radio, mientras que la segunda marca de referencia a 5,00mm de la punta puede ser utilizada para medir el diámetro total de la rexis. La punta triangular es muy delicada y es eficaz a la hora de hacer la primera rasgadura así como para agarrar el tejido durante el procedimiento de la capsulorrexis.

Medidas: 85mm de longitud desde el inicio del mango hasta la punta, punta de 13mm con marcas a 2,5mm y 5mm de la punta.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja de 1 unidad

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 23 de febrero del 2016, rev.1