


CANULA LACRIMAL BURNSTINE 23G

REFERENCIA: K7-3016

MARCA: KATENA

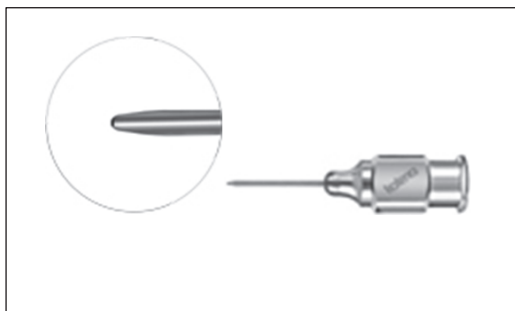

Descripción: Cánula lacrimal Burnstine con puerto para irrigación directa. Su longitud es idónea para sondear e irrigar el sistema proximal lacrimal, eliminando la necesidad de colocación de sondas de Bowman para medir la obstrucción canalicular. Punta roma.

Medidas: 23 Ga, longitud del puerto 0,15 mm. Longitud total de la cánula 13 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 06 de julio del 2015, rev.2